


BAÑO MARÍA DE TEMPERATURA CONTROLADA

Los baños de temperatura controlada para agua o aceite marca DIES, están diseñados con los más estrictos estándares de calidad y desempeño.

Sus aplicaciones se encuentran en cualquier laboratorio clínico, industrial o de investigación, donde sea necesario mantener una muestra a temperatura controlada, inmersa en agua o aceite (baño María).


Estos baños se fabrican para temperaturas sobre o sub - ambiente, de acuerdo a la aplicación específica. Adicionalmente existen una amplia gama de accesorios para agitación y recirculación, que los convierten en una opción muy versátil en el laboratorio.



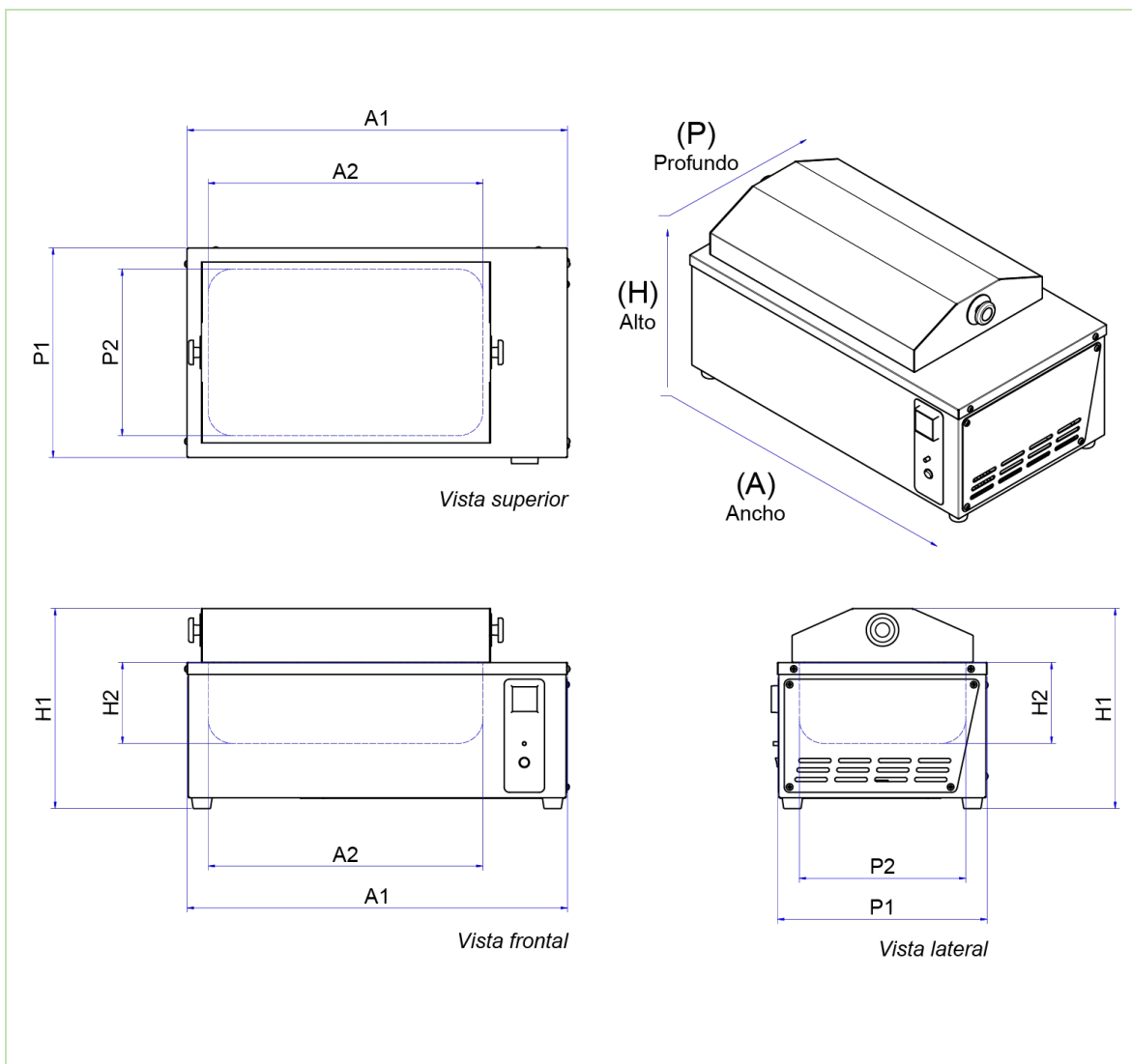

A: Ancho - H: Altura - P: Profundidad

Modelo/Dimensión (mm)	A1	A2	H1	H2	P1	P2
D5K	500	305	350	150	240	160
D10K	500	305	370	150	330	250
D20K	705	510	370	150	390	310

Modelo	Baño de maría		
Marca	DiEs		
País de origen	Colombia		
Modelo baño de maría	D5K	D10K	D20K
Capacidad (litros)	5	10	20
Dimensiones EXTERIORES (mm)			
Ancho	500	500	705
Alto	350	370	370
Profundo	240	330	390
Dimensiones INTERIORES (mm)			
Ancho	305	305	510
Alto	150	150	150
Profundo	160	250	310
Gradillas incluidas	1	2	3
Capacidad de gradillas	2	3	6
Montaje	Mesón		
Voltaje (VAC/60Hz)	115 V	115 V	115 V
Rango de temperatura (Versión sobre ambiente)	Ambiente – ebullición +/- 1°C		
Rango de temperatura (Versión sub ambiente)	4°C – ebullición +/- 1°C		
Sensor de temperatura	PT100		
Agitación	Opcional		
<p>Control</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Control Electrónico micro procesado • Indicación digital en pantalla. • Menú de configuración y calibración por pantalla de fácil acceso al usuario protegida por password • Algoritmo de control tipo P.I.D. con salida PWM. • Resolución del control: +/- 1% del set point. • Resolución de la medida +/- 0,1 °C • Elemento de salida: Relé de estado sólido con cruce por cero. 		
Alarmas (visual)	Alta temperatura		
Materiales interiores	Acero inoxidable 304		
Materiales exteriores	Lámina CR con acabado en pintura epóxica de aplicación electrostática		

Calle 76 sur. No. 55 - 70. PBX. (57) (4) 4441848

Itagüí, Antioquia, Colombia

ventas@dies.com.co / www.dies.com.co